


SH-1462N
2クランクハイロー
ギャッチベッド

取扱説明書

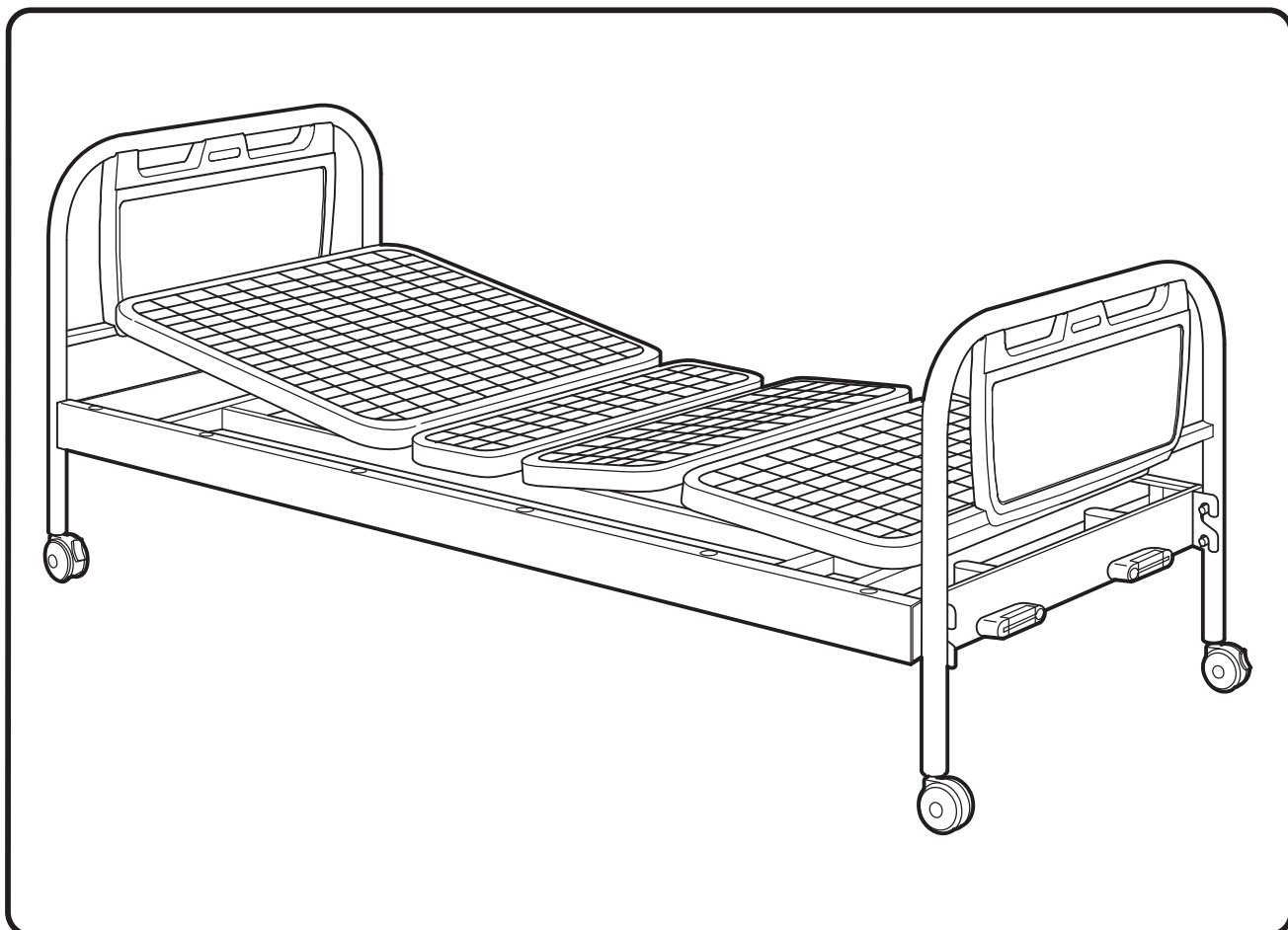

ベッドを正しくお使いいただくためにシーホネンスからのお願い

このたびは、2クランクハイローギャッチベッドをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書にはご使用上の注意事項や操作方法が記載されています。
- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使いください。
- ベッドを使用される方ばかりでなく、付き添いの方にも安全な操作方法を説明してください。
- お読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にお問合せください。




シーホネンス株式会社

もくじ／各部の名称／仕様

もくじ

各部の名称／仕様	1
安全にお使いいただくために	2～3
ヘッド・フットボード／キャスターについて	4
コンパクト収納ハンドル／サイドレールについて	5

各部の名称

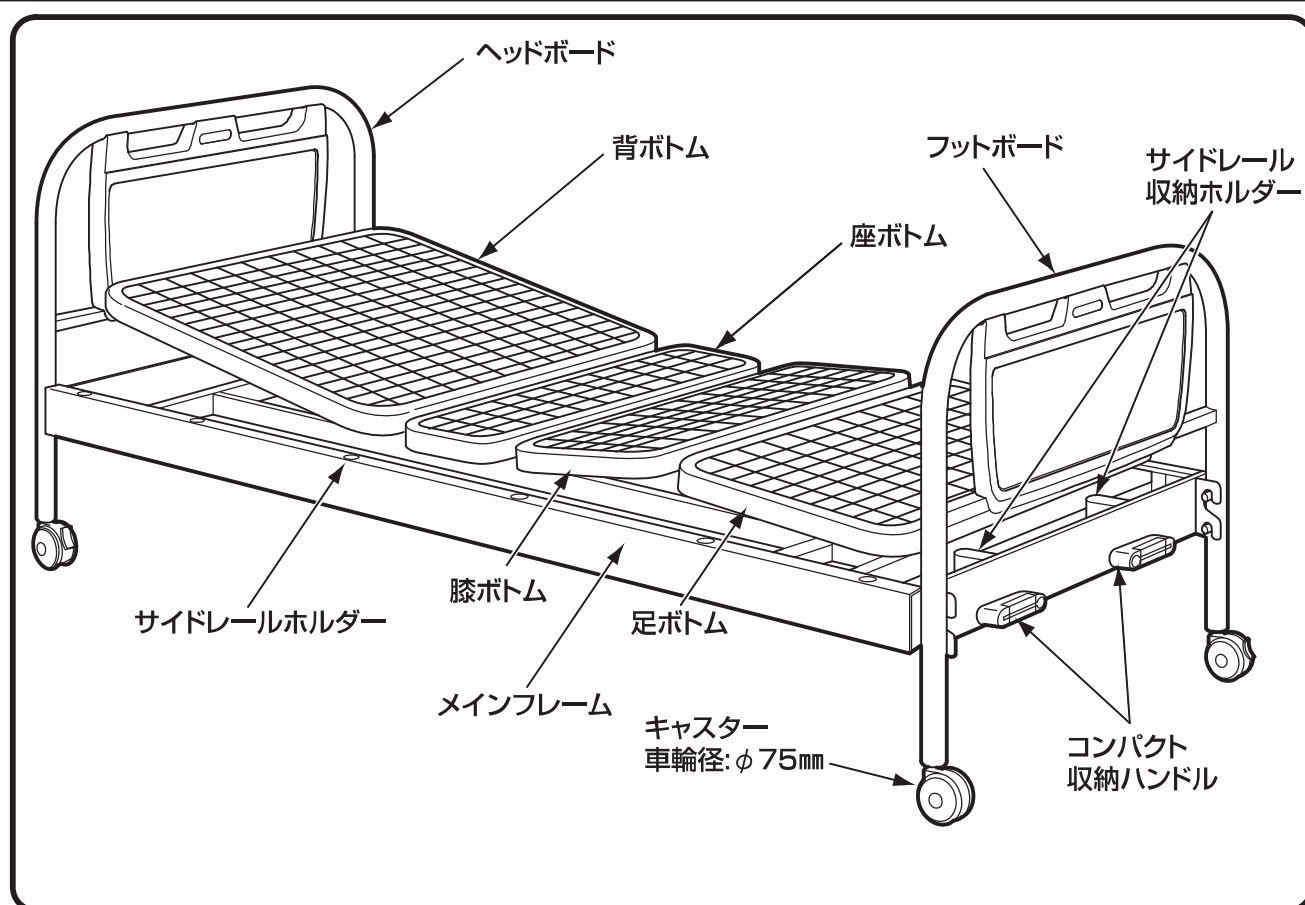

仕様

品 番		SH-1462N
寸 法	長 さ	2110mm
	幅	910mm
	床 高 さ	415/470/525mm
材 質	メインフレーム	スチール製(抗菌粉体塗装)
	ボトム	ワイヤーメッシュボトム(抗菌粉体塗装)
	ヘッド・フットボード	フレーム/スチール製 ボード/ポリエチレン樹脂
	キャスター	φ75mm双輪キャスター(対角ロック付き)

安全にお使いいただくために



警告


以下の項目は、全て危険行為ですので必ず守ってください。守らなければ人が生命にかかわるけがを負う可能性が想定されます。

●うつ伏せで背上げ操作をしない



事故、ケガの原因となります。

うつ伏せで寝た状態での背上げ操作は関節を逆さに曲げることになり、ケガの原因になります。

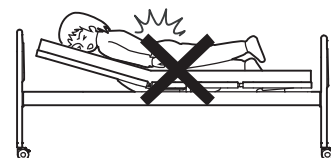


●ベッドの中やフレームの間にもぐりこまない



ベッドの可動部分（ボトムなど）とフレームやサイドレールとの間に頭や、腕や足を挟むとケガの原因となります。

ベッドの中にもぐり込んだり、ベッドの中に頭、腕や足などを入れないこと。ベッドの下や周りに障害物がないか確認して操作してください。

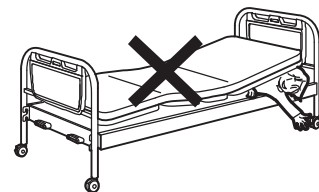


●踏み台代わりにしたり、ベッドの上で飛び跳ねない



ベッドからの転落、転倒してケガの原因となります。

特にお子さまにご注意ください。

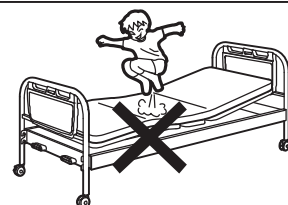

●サイドレール、ヘッドボード、フットボードのすき間に注意



事故、ケガの原因となります。

サイドレールや、ヘッドボード、フットボード各部のすき間に頭や首が入らないよう注意してください。すき間に入ると抜けなくなり、ケガをする恐れがあります。



●手や足などを挟まれないように



事故、ケガの原因となります。

ベッドの操作時には、頭や腕、足をベッドの外に出してサイドレールや周辺の家具などに挟まれたりしないように十分注意してください。また、医師や、看護、介護される方も患者さんの身体の位置や、状態に注意して行ってください。特に、ベッドの操作中は、ベッドフレーム、ボトムの下に手や足を入れないでください。



●症状にあわせて使用してください



患者さんあるいはご家族の方が直接ベッドを操作される場合は、医師や介護する方から症状にあった使用方法について十分説明をうけたうえでご使用ください。

症状によっては、ベッドの操作が症状を悪化させる場合があります。



●乳幼児には使用しないでください



事故、ケガの原因となります。

このベッドは、大人用の設計になっています。乳幼児が使用するとヘッド、フットボードやサイドレール等のすき間に挟まったり、すきまから転落する可能性がありますので絶対に使用しないでください。

安全にお使いいただくために



注 意

以下の項目は、全て危険行為ですので必ず守って下さい。守らなければ人がケガを負う可能性や物品的損害の発生が想定されます。

●ベッドを二人以上で使用しない



注 意

事故、破損の原因となります。

このベッドの最大使用者体重は1350N(135kg)です。




●上がっている背ボトムや脚ボトムに乗らない



注 意

事故、破損の原因となります。

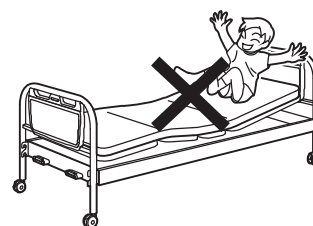

●他社製品とは組み合わない




注 意

事故、破損の原因となります。

マットレス、サイドレールなどは他社製品を使わないでください。

必ず弊社適合商品をお使い下さい。

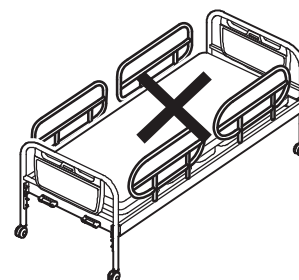

●コンパクト収納ハンドルの操作は慎重におこなう



注 意

事故、ケガの原因となります。

コンパクト収納ハンドルの操作は便利で簡単ですが、操作時は、患者さんの身体位置、状態を確認しながらおこなってください。

また、操作前にベッドの下および、ベッド周辺を十分にチェックしてからおこなってください。

●不安定な路面での移動はさける



注 意

事故、ケガの原因となります。

凹凸の激しい路面や、段差の大きな路面での移動はできるだけ行わないでください。

もしそのような場所で移動される場合は、ゆっくり移動させてください。




●ベッドからの転落に十分注意する



注 意


サイドレール使用時でも、サイドレールとサイドレール、各ボードとサイドレールのすき間から落下したり、サイドレールの上から身をのり出して落下して、ケガをする恐れがあります。

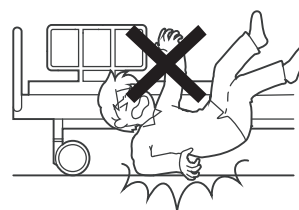


ヘッド・フットボード／キャスターについて

ヘッド・フットボードの取り付け方法

- ① はじめに、ベッドの床の高さを決めて下さい。

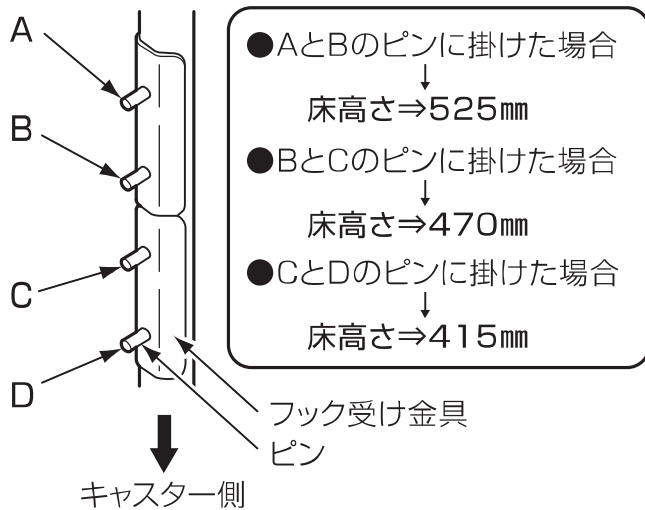

- ② 本体フレームフック金具をヘッドボード、フットボードのフック受け金具に確実にかかるように取り付けます。

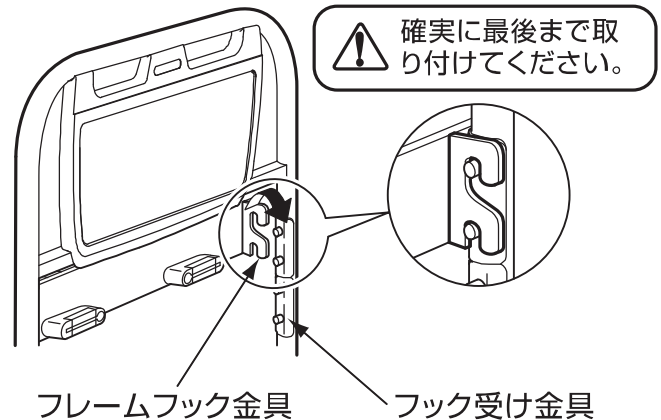

事故、破損、ケガをします。




警告

- ヘッドボード、フットボード着脱の際は、手や指を挟まないよう注意して下さい。
- ヘッドボード、フットボード取り付けの際は、フック金具が受け金具にきちんとはまり込んでいるか、確認して下さい。
- ヘッドボード、フットボードには、腰をかけたり寄りかかったりしないで下さい。

対角ダブルストッパーキャスターについて

- 対角ダブルストッパーキャスターのストッパーペダルは、ヘッドボード・フットボード側より向かって右側にあります。

ストッパーペダルの先端を踏み込むとロックされます。
ロックを解除するときは、ストッパーペダルを押し上げて下さい。

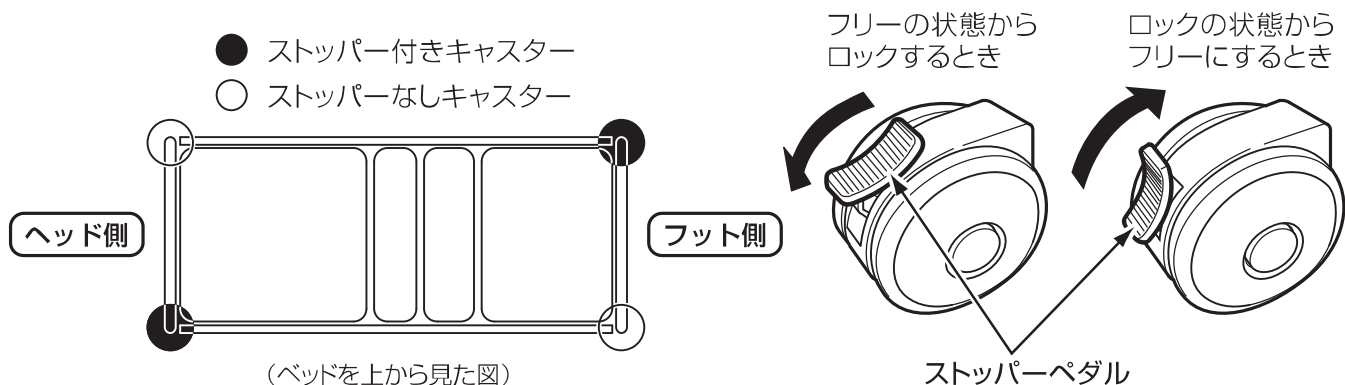

事故、破損、ケガをします。





注意

- 移動する際は必ずストッパーペダルがフリーの状態になっていることを確認して下さい。
- ベッド設置後は必ずストッパーペダルを踏みこんでロックして下さい。
- キャスターがロックされた状態でベッドを無理に動かしますと、故障の原因となりますので、絶対に行わないでください。


コンパクト収納ハンドル／サイドレールについて

コンパクト収納ハンドル

- ハンドル操作により、背ボトムや膝ボトムの角度を調節することができます。

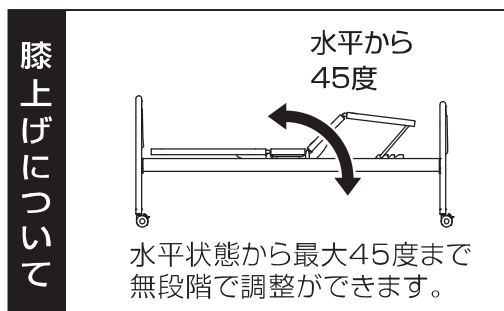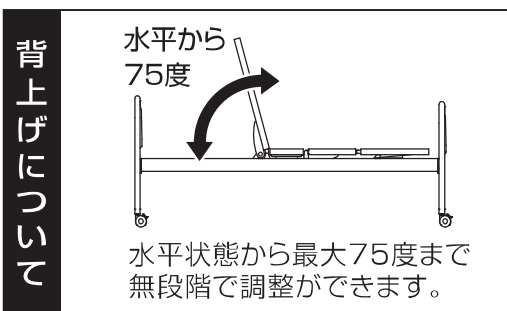

●操作方法

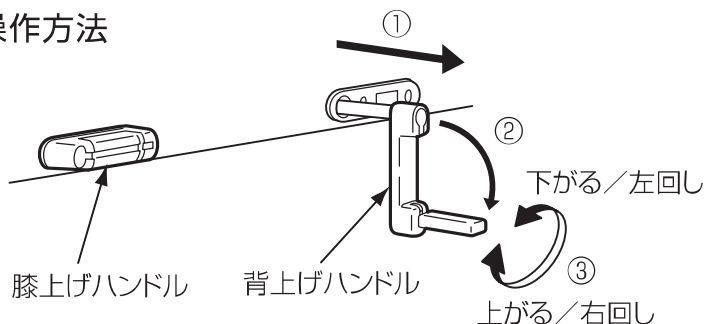

- ① ハンドル全体を手前に引き出します。
 - ② 折りたたみハンドルを倒します。
 - ③ 右に回せば上がり、左に回せば下がります。
- ※①～②の手順を逆から行うことで収納することができます。

事故、破損、ケガをします。




警告

- 足を引っ掛けたり転倒の可能性があるので、使用後は必ずハンドルを収納してください。
- 背ボトム、膝ボトムが上がりきる、また下がりきるとそれ以上回転しませんので無理に回さないでください。

サイドレールの取付方法

当社が推奨する
サイドレール品番：AB-1360/AB-2300/AB-2400

- サイドレールを下図のようにベッド両サイドのサイドレール取付穴にしっかりと差込んで使用してください。

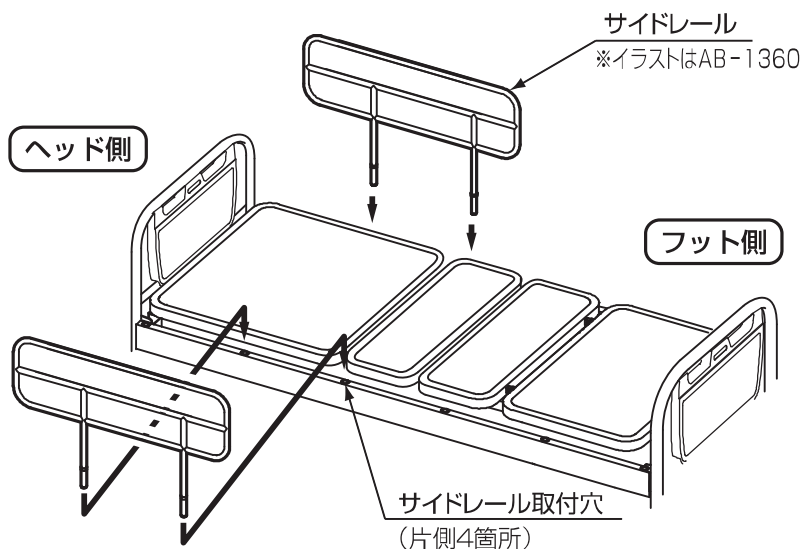

※ベッド本体の四隅にある穴はIVポールを差し込むことができます。




警告

サイドレールは所定の場所に差込んでください。

ベッド中央(丸で囲んだ部分)片側2ヶ所のサイドレール取付穴を使用して、1本のサイドレールを差込まないでください。

下図のように1本のサイドレールにてベッドを使用した場合、サイドレール本来の機能が損なわれ、転落してケガをするおそれがあります。

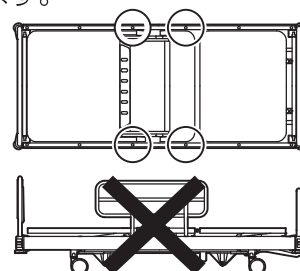

修理・お取り扱いお手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店、
レンタル取次店へお申し付けください。

【カスタマーサポートお問い合わせ窓口】

無 料 ツーワ
FreeCall 0120-20-1001 10月1日は福祉用具の日



シーホネンス株式会社

〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目10番17号 TEL (06) 6981-3432

© 2005 SEAHONENCE INC. (シーホネンス株式会社) All Rights Reserved.